

HAKUJU

ゆったりと、
しっかりと、
最高の時間を。

ヘルストロン
HEALTHTRON

HEF-Jz12000M



ヘルストロンが導く、
健やかで満ち足りた時間。



全身を包み込む電界と、改良を重ねてたどりついた上質の座り心地が、

日常の中に穏やかさとゆとりの時間を演出。

設立当時から変わらない、毎日をすこやかに過ごしてもらいたいという私たちの願い、

そしてやすらぎのひと時を、ヘルストロンがお届けします。

全身をやさしく、しっかりと包みこむ
マルチ電極の電界。



6つの電極が安定した電界を形成。

上部・座部・オットマンだけでなく、背部と左右側部に補助電極を加えたマルチ電極方式を採用。6つの電極が電界をより安定させ、全身を効率よく包み込みます。

効果

頭痛・肩こり・不眠症・
慢性便秘の緩解

電界とは

電界とは電気の力が働く空間。自然界には、たくさんの電気が存在しています。そして、人の体にも微弱ですが電気があり、これによりさまざまな機能が正常に保たれています。ヘルストロンは、電気ので身体を包みこみます。



※ヘルストロンHEF-Jz12000Mは、「家庭用電位治療器」です。(医薬品医療機器等法上の分類)

“やさしさ”をカタチに。



さらにスタイリッシュに進化した北欧デザイン。

デザインはノルウェー出身の世界的な家具デザイナー、オーラフ・エルドイ氏と、ノルウェーを代表する家具メーカー、フォラフォーム社とのコラボレーション。ひじかけ部は自由を象徴する鳥の翼をイメージし、高品位のデザインに仕上げました。



家具デザイナー
オーラフ・エルドイ氏

fora
form

ファブリックには欧州のファブリックメーカー、オーデヤス社製を採用。やわらかく、しなやかな質感が上質な座り心地を生み出すと同時に洗練されたデザインをさらに引き立てます。

a
audéjas



毎日使える、使いたくなる。



リラクスの新しいスタイル。




リラクスの時間を導く「ゆったり」休息モード。

高電圧の治療1時間と、
リラクスに最適な低電圧
2時間を組み合わせたモード。
テレビなどを見ながらゆったり
とした時間が過ごせます。



電気をより実感する「しっかり」体感モード。


やや強めの電界を形成する機能を搭載。電界センサーが反応しやすくなり、椅子に座ったまま上部電極に触れることで変化を感じることができます。

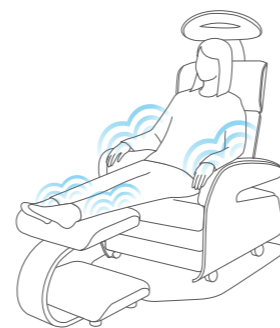

※電気の感じ方には個人差がございます。
※イラストはイメージです。

らくらく電動リクライニング。

電動の無段階リクライニングでリラックスしたままお好みの角度へ調整可能。飛行機のファーストクラスの様に、最大約139度までリクライニングできます。

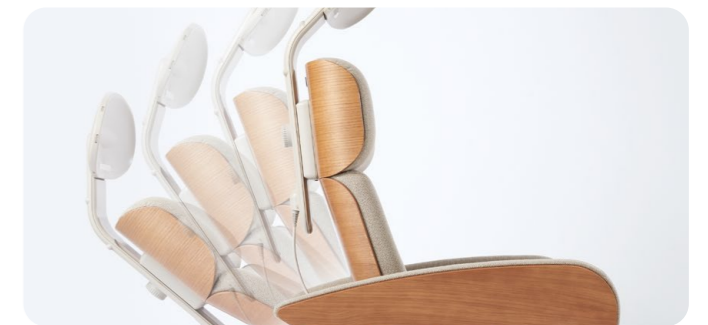

液晶付きのワンタッチリモコン。

電界イメージをグラフィカルに表示する新液晶リモコンを採用。電圧やタイマーなど、ご使用の状態が一目でわかります。



※抗菌仕様

手軽に使える省エネ設計。

30日間、毎日1時間使用しても電気代はわずか13.5円程度。
気兼ねなく、毎日お使いいただけます。

1ヶ月電気代
約13.5円

※消費電力120kWhまでの1kWh当たりの単価30円で算出(2024年3月現在、東京電力データ)
※記載の通電時間は、電気代算出のための目安です。※温熱ヒーター使用時は除きます。

快適な姿勢に合わせて高さが選べるオットマン。

足元はオットマン仕様で、上段・下段どちらでも、お好きな姿勢で治療できます。さらにヒーター機能を内蔵し、寒い日でも快適にご使用できます。



4輪大型キャスター。

移動させるのに便利な、全方向に向く大型キャスターを4つ装備。前2輪はストッパー付きです。



HEF-Jz12000M 仕様

類別	機械器具78家庭用電気治療器
一般的名称	家庭用電位治療器
分類	管理医療機器
販売名	白寿交流高圧電界保健装置 ヘルストロン HEF-Jz12000M
認証番号	302AKBZX00074A01
定格電圧	AC100V
定格消費電力	電位:15W 加温:25W 電位+加温+リクライニング:90W
定格周波数	50-60Hz
定格出力電圧	上部電極:AC6000V 座部電極:AC6000V 補助電極(背部・側部左右):AC6000V
治療電圧(電極間電位差)	3段階(低)6000V(中)9000V(高)12000V
電極数	6(マルチ電極)
導子部の耐湿性	IPX1
タイマー設定	6段階10分、20分、30分、40分、50分、60分(休息モード:3時間固定)
重量	椅子・高圧ユニット・上部電極:約76kg オットマン:約8kg 床保護マット:約2kg
オットマンヒーター機能	表面温度約40~50℃(周囲温度20℃の場合) タイマー設定/60分

※本機器の仕様は製品改良により予告なく変更することがあります。
※ヒーターは治療器としての温熱効果を持つものではありません。

HEF-Jz12000M 税込価格 1,320,000円 (税抜価格 1,200,000円)


付属品/取扱説明書、保証書、検電器、カバー(ヘッドレスト、座部、温熱2ステップオットマン、左右肘)、床保護マット

※印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。※ヘルストロンは当社の登録商標です。

〈 寸法 〉



〈 オットマン寸法 〉

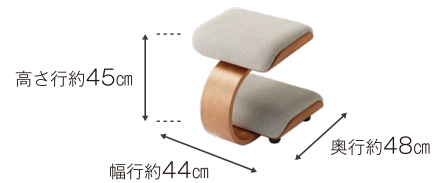

事前に必ず搬入経路の寸法をご確認ください。
幅70cm以上が必要です。

国際水準の
品質・安全性



PSEマークは電気製品の安全性を示す目印で、多項目の安全試験をはじめ、工場での品質検査などの安全基準をクリアした電気製品につけられます。



HAPIマークは一般社団法人日本ホームヘルス機器協会が認証するもので、健康機器の信頼性・安全性を確かめる目安となっており、すべて製造物賠償責任保険(PL保険)がついています。



白寿生科学研究所は医療機器における品質マネジメントシステムの国際規格であるISO13485の認証を取得しております。

安全に関するご注意

ヘルストロンは正しく使っていただくことで、効果を発揮する医療機器です。使用を誤ると人体に悪影響や物的損害が発生する場合があります。詳しくは取扱説明書を必ずお読みいただき、医療上の注意事項をご確認のうえ、正しくお使いください。

ご使用にあたって

この製品には保証書を添付しております。保証書は所定事項を記入のうえ発行しますので、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

これからの健康をヘルストロンとともに。

ヘルストロンの効果をより高めるためには、自然の流れに沿った生活を心がける必要があります。私たちが唱えているのは、「ゆとりある精神」「バランスのとれた食事」「適度な運動」という三位一体の健康哲学です。ヘルストロンとともに、毎日の健康管理を行い健やかな日常へつなげましょう。

ゆとりある
精神

適度な
運動

バランスの
とれた食事

お問い合わせ

電話

0120-05-8910

ホームページ

ヘルストロン 検索

https://www.hakuju.co.jp

製造発売元

一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員 No.A-24



株式会社 白寿生科学研究所

本社 〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 1-37-5

2024.3改訂



201106-B-2043